

FEMOSİL™ Ostomy Paste



BARKOD NO	REF NO	ÜRÜN ADI
8680495075916	246642	Femosil- Ostomi Pastası, 60 gr
8680495075954	246642	Femosil- Ostomi Pastası, 60 gr

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bu ürün, bio-based (biyolojik kaynaklı) içeriğe sahip olup, ostomi torbasının cilde etkin bir şekilde sabitlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Ürün, Stoma ile adaptör arasında kalan boşluğu doldurarak, stoma çevresinde su geçirmez bir bariyer oluşturur ve böylece etkili bir sızdırmazlık sağlar. Aynı zamanda cildi rahatlatır ve korur.

Özellikle sızıntı riskinin yüksek olduğu durumlarda — örneğin aktif günlerde veya gece boyunca — ekstra güvenlik sunar.
Yapışkan yapısı sayesinde kolayca uygulanabilir, cilt yüzeyine eşit bir şekilde yayılır ve böylece sızıntıya karşı, bariyer özelliği gösterir.


Formülasyonu, yüksek oranda nem emme kapasitesine sahiptir; bu özelliği sayesinde ciltte, maserasyonun (aşırı nem nedeniyle oluşan cilt yumuşaması ve tahriş) önlenmesine yardımcı olur.

Kullanımı son derece kolaydır; doğrudan cilt üzerine ve ostomi bariyeri üzerine uygulanabilir. Hızla kurur ve kullanıcı dostu yapısı sayesinde, ostomi bakımında yüksek beklentileri karşılamak üzere geliştirilmiştir.


ÜRÜN AVANTAJLARI

1. Macun tüpü, son damlasına kadar boşaltılabilir
2. Acıyı en aza indirmek için, düşük alkol içerir
3. Cilt bariyerinin uyumunu iyileştirmek için, cilt çatlaklarını kapatmak ve doldurmak için kullanılır
4. Stoma yakınındaki düzensiz cilt hatlarını doldurmak veya kapatmak için kullanılır ve daha düz bir yüzey oluşturur.
5. Ostomi drenajının, kese contasının altına girmesini önler


FEMOSIL™ PASTE NASIL KULLANILIR?

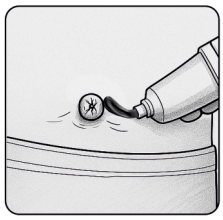

1. Pastayı derin cilt kıvrımlarını, yara izlerini veya düz olmayan yüzeyleri düzleştirmek için cilde uygulayın veya doğrudan yapışkan/adaptör üzerine uygulayın. Yapışkan alanın tamamına pasta uygulamayın.

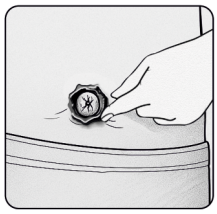

2. Gerekirse pastayı, ıslatılmış bir spatula veya parmak kullanarak hafifçe düzleştirerek düzeltin.

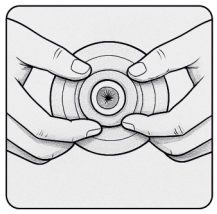

3. Adaptörü/yapışkanı uyguladıktan sonra, tüm adaptöre/yapışkana parmaklarınızla bastırarak stomaya mükemmel bir şekilde oturduğundan emin olun.



GELİŞİM MEDİKAL
Tıbbi Malz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti

Merkez Ofis:

+90 212 632 90 71
Seyit Ömer Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi No:34 Fındıkzade | İstanbul
www.gelisimmedikal.com

Fabrika:

+90 312 385 54 33
Ostim OSB Mahallesi, 1165 Caddesi, No: 7-9 06374 Yenimahalle, Ankara
www.gelisimfabrika.com

BARKOD NO	REF NO	ÜRÜN ADI
8680495075916	246642	Femosil- Ostomi Pastası, 60 gr
8680495075954	246642	Femosil- Ostomi Pastası, 60 gr